

パーソナル有機合成装置 シングルマスター

PPX-1000型専用オプション発売

2025年6月販売スタート！パーソナル有機合成装置PPX-1000型の専用オプションを発売いたします。

PPX-1000型をさらに使いやすくするオプション品を発売いたします、さらに「使いやすく」「快適に」「効率よく」合成実験がおこなえます。

PPX-1000型



スターラー
システム

インペラー
システム

1. 反応容器、アダプター、防滴カバー

さまざまな反応容器が使用できるようになりました。全部で9種類外径の容器が使える実験の自由度が増えました。

反応容器：試験管、ストップコック付反応容器、封管反応容器、セパラブルフラスコなど

防滴カバー： $\phi 16.5 \times 4$ 本、 $\phi 20 \times 3$ 本、 $\phi 18 \times 3$ 本、 $\phi 24$ 、 $\phi 30$ 、 $\phi 34$ 、 $\phi 35$ 、 $\phi 38$ 、 $\phi 50$

アダプター： $\phi 16.5 \times 4$ 本、 $\phi 20 \times 3$ 本、 $\phi 18 \times 3$ 本、 $\phi 24$ 、 $\phi 30$ 、 $\phi 34$ 、 $\phi 35$ 、 $\phi 38$ 、 $\phi 50$

防滴カバー価格 **¥9,500～** アダプター価格 **¥62,000～**

2. PTFE製攪拌翼


S型：二枚後退翼・・・スラリー、沈降防止

F型：三枚後退翼・・・懸濁液

W型：ワイドバトル翼・・・広い粘度範囲

価格 **¥80,500～**

※3種類の攪拌翼が1本ずつ入ったお得なセットも販売しています。

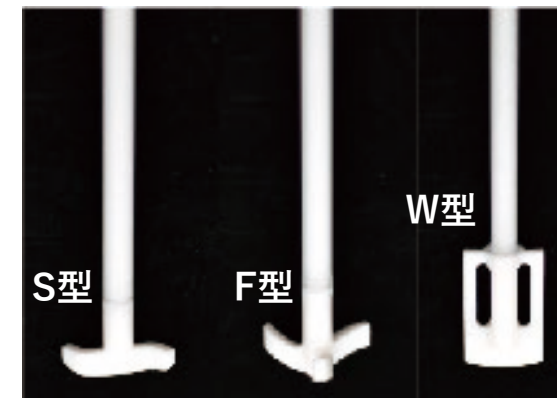

3. PPX型専用反応容器

反応容器の試料の抽出が可能な、専用ベッセルを新たにラインナップ。
ガラスろ過フィルター付は粉体や触媒のろ過が可能なフィルターが付属しています。

流出ノズル付きベッセル： 50mL 外径φ38、100mL 外径φ50、150mL 外径φ60 価格 **¥21,000～**

フィルター付ベッセル(ガラスろ過フィルター付)： 100mL 外径φ50、150mL 外径φ60 価格 各**¥152,500**

オプション： ドレンバルブ、接続アダプター(各ベッセルに付属可能) ドレンバルブ価格 **¥97,500** 接続アダプター価格 **¥38,500**


流出ノズル付きベッセル

50mL 外径φ38
100mL 外径φ50
150mL 外径φ60




フィルター付ベッセル
(ガラスろ過フィルター付)

150mL 外径φ60
100mL 外径φ50

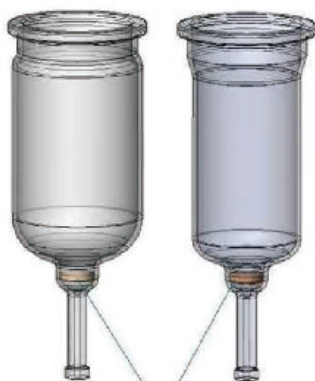

ガラスフィルター

ドレンバルブ

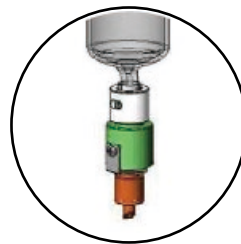

接続アダプター



テフロンチューブ
継手ネジ 1/4-28UNF

4. セパラブルクランプ

小型セパラブルフラスコの
気密性を大幅に改善。還流
実験などの恒温の溶媒

価格 **¥47,000**



5. 小型セパラブルフラスコ用 スタンド

自立しない流出ノズル付ベッセル用スタンド 価格 **¥27,000～**