



2025年も宜しく
お願いします。

Sale!

ヒット製品の旧モデルもあります。
数量限定・早い者勝ちです！
旧モデルでも、アフターメンテナンスは万全！

期間 / 2025年3月31日まで

※数に限りがありますので、お早めに最寄りの営業所にご確認ください。
※価格には消費税は含まれておりません。



予算に余裕がない・・・
今と同じ機種が欲しい・・・

そんなお客様にオススメです

EYELA

耐溶媒性の高い真空ポンプ

インバーターダイヤフラム型 真空ポンプ
DTC-31DC型



限定
10台

インバーター制御方式のダイヤフラム型真空ポンプです。ロータリーエバポレーター+真空コントローラー NVC-3000 型と組合せることによりエバポレーターシステムと連動して運転できます。

排気速度：30L/min(50Hz)
到達真空度：10hPa(約7.5Torr)
外寸法(mm)：142W×288.5D×202H
電源入力：1.5A.150VA
電源電圧：AC100V

Price Down
¥210,000
¥168,000

オプションの真空コントローラー NVC-3000 型と接続させてダイヤフラム型真空ポンプの回転数をインバーターで制御し、適切な圧力を精度良くコントロールします。
接ガス部は耐蝕性に優れた構造です。ロータリーエバポレーターや真空乾燥器などの減圧装置として使用できます。
※真空コントローラー NVC-3000 型と連動させる場合は接続コードが必要になります。
製品コード No.271500 価格 ¥16,000

有害蒸気を効率よく捕集！

卓上型冷却トラップ装置 ユニトラップ
UT-1010型

真空乾燥器や濃縮装置などから排気される有害蒸気を真空系内で効率よく捕集し、真空ポンプへの蒸気の吸入量を大幅に減少させ、真空ポンプの寿命を伸ばします。
冷媒ガスは、地球にやさしい低GWPのR452Aを使用しています。

トラップ方式：缶体冷却方式
除湿容量・最低到達温度：Max.0.5 kg(水)・-45℃
槽内寸法(mm)：内径 90×225H
容量：約 1.4L
外寸法(mm)：420W×375D×317H
電源入力：7A,700VA
電源電圧：AC100V
※別途運賃等が必要です。



トラップ装置本体 + オプションのお得なセットをご用意しました！

- Aセット・水系試料のペーパートラップに：
UT-1010 型 + ノズル付き蓋 B・製品コード No.192410
- Bセット・酸・有機溶媒系試料のペーパートラップに：
UT-1010 型 + ガラスコンデンサセット B・製品コード No.199740

Aセット
Price Down
¥300,000
¥218,000

限定
5セット

Bセット
Price Down
¥334,300
¥245,000

限定
5セット



真空ポンプ、真空ホースは付属していません。
こちらからお選びください。
真空ポンプはこちら 真空ホースはこちら




目玉!

**二重ジャケット構造で
受フラスコの再蒸発を防止**

1L受フラスコ用冷却バス
+ドレンコック付受フラスコ1L

真空制御をしない場合受フラスコに溜まった溶媒が室温によって再蒸留を起し回収率を悪くすることがあります。その際には受フラスコを冷却して再蒸留を抑えることができます。

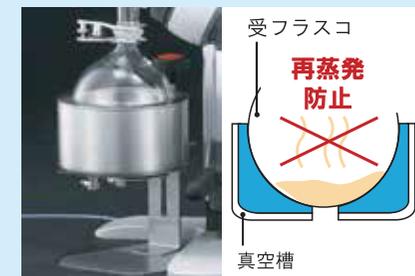

セット価格
Price Down
¥102,000
¥29,800

限定
5セット

2025年1月6日発行

東京理化器械株式会社 営業所

札幌 Tel.011-709-8101 筑波 Tel.029-851-8241
仙台 Tel.022-227-3761 埼玉 Tel.048-722-3713
那須 Tel.0287-62-6000 千葉 Tel.043-275-0043

東京 Tel.03-6757-3388 静岡 Tel.054-267-1616
横浜 Tel.045-473-5477 名古屋 Tel.052-571-3171
神奈川 Tel.0463-21-4321 関西 Tel.06-6131-0905

広島 Tel.082-511-1531
福岡 Tel.092-621-5870

<https://ssl.eyela.co.jp>

アイラ・カスタマーセンター
0120-076-554